



There is no substitute for quality

# Hybrid TWISTER

Brevet / Patente: DE 10 2014 010 033

Nouveau!  
Nuevo!



## Notre expert en cas particuliers

Traitez sur toute leur surface, avec un seul instrument, les callosités et les rhagades, ainsi que les kératinisations locales partielles, p. ex. sur le bout des orteils et les cors.

Grâce à la particularité de cette nouvelle forme - longue, parallèle et équipée d'une pointe - il est possible de travailler aussi efficacement sur les surfaces que dans les interstices.

Ceci facilite le déroulement du traitement, réduit le changement d'instruments et par conséquent le travail occasionné par leur retraitement.

## El experto nuestro para tratamientos especiales

Elimine ampliamente callosidades y grietas, cornificaciones parciales locales (por ejemplo, en las puntas de los dedos del pie) y callos con un solo instrumento.

La particularidad de esta figura nueva - con la pieza larga y paralela con punta, permite utilizarla de la misma manera tanto en superficies libres como en áreas intermedias.

Esto facilita el proceso de tratamiento, reduce el cambio de instrumentos y, con ello, también el proceso de reprocesamiento.



La granulation hybride d'une grande efficacité, qui allie le diamant et la céramique, offre une agréable sensation de ponçage ; vous serez conquis par la grande puissance d'abrasion du Hybrid TWISTER. Malgré sa finesse, la granulation hybride permet d'éliminer les callosités de manière nettement plus rapide, tout en laissant les surfaces plus lisses.

Profitez ici aussi des avantages significatifs du Hybrid TWISTER:

1. Le grain abrasif du diamant = augmente la durée de vie et par conséquent la rentabilité
2. Le grain abrasif de la céramique = offre une puissance d'abrasion élevée, des surfaces lisses, et permet de gagner du temps
3. La conception TWISTER = augmente le potentiel de refroidissement avec la technique humide et la puissance d'aspiration avec la technique à sec

En tant que dispositif médical, les Hybrid TWISTER peuvent être utilisés indifféremment avec la technique à sec ou avec la technique humide et facilement intégrés dans le processus de retraitement.

El grano híbrido de extremada eficacia –una mezcla de diamante y cerámica– garantiza una agradable sensación de limado. El elevado poder de abrasión del Hybrid TWISTER le fascinará. Pese a que el grano híbrido es más fino, las callosidades pueden limarse de un modo notablemente más rápido y las superficies quedan lisas.

Benefíciense también de las ventajas esenciales de la serie Hybrid TWISTER:

1. El grano de diamante = aumenta la vida útil y con ello la rentabilidad
2. El grano de cerámica = garantiza un alto poder de abrasión, superficies muy lisas y un ahorro de tiempo considerable
3. La construcción del TWISTER = aumenta el potencial de enfriamiento en técnicas húmedas y el poder de eliminación en técnicas secas

Como producto sanitario, Hybrid TWISTER puede utilizarse tanto en técnicas secas como húmedas e integrarse sin dificultad en el proceso de procesamiento.




Photo: Fritz Bittig, Podologue et enseignant en Podologie, Auteur de „Bildatlas Podologie“  
Foto: Fritz Bittig (podólogo, profesor especializado de podología y autor del libro „Bildatlas Podologie“)

#### hybride gros grain

- élimination des durillons épais
- traitement des rhagades

#### grano híbrido grueso

- reducción de callos hinchados
- limado de grietas

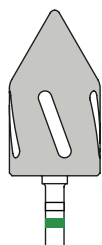

BUSCH  
Ø ISO

HT6852  
120

#### hybride grain moyen

- élimination des fortes callosités
- traitement des rhagades

#### grano híbrido medio

- eliminación de callos duros
- limado de grietas



BUSCH  
Ø ISO

HT852  
115

CE 0124

